

NAVODILA ZA UPORABO AVTOINJEKTORJA EPIPEN

Avtoinjektorji Epipen so namenjeni takojšnji uporabi pri pacientih z znanim večjim tveganjem za anafilaksijo, vključno s posamezniki, ki so anafilaktično reakcijo že doživeli.

Pacienta namestimo:


- v ležeči položaj, če je bled, slaboten, zmeden,...
- v bočni položaj, če bruha ali
- v sedeči položaj, če težko diha.



1. Avtoinjektor Epipen primete z dominantno roko, s palcem najbližje modri varnostni zaponki. Z drugo roko odstranite modro varnostno zaponko.



2. Avtoinjektor Epipen držite v razdalji približno 10 cm od zunanje strani stegna. Oranžna konica mora biti obrnjena proti zunanji strani stegna.

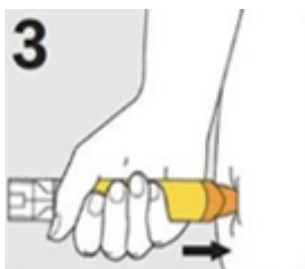

3. Trdno pritisnete Epipen v zunanjo stran stegna, tako da je pod pravim kotom (90°). Ko se naprava aktivira, zaslišite »klik«. Avtoinjektor Epipen držite na mestu 5 sekund.



4. Avtoinjektor Epipen odstranite z mesta injiciranja in mesto rahlo masirajte, da pospešite resorbcijo zdravila.

5. Pokličite 112, prosite za prihod reševalnega vozila, in pojasnite, da gre za anafilaktično reakcijo.

6. Če se simptomi ne izboljšajo, lahko po 5 – 15 minutah uporabite še drugi avtoinjektor Epipen.